

DABI ATLANTE

surdent

The logo icon consists of three overlapping, rounded rectangular shapes that create a sense of depth and perspective, resembling a stylized 'C' or a set of nested frames.

Croma



 Croma



NOMENCLATURA

Sufijo - AIR

Indica que el modelo es con brazo neumático

Sufijo - Cart

Indica que el modelo es con carro



Croma


MODELOS:

CROMA AIR



CROMA CART



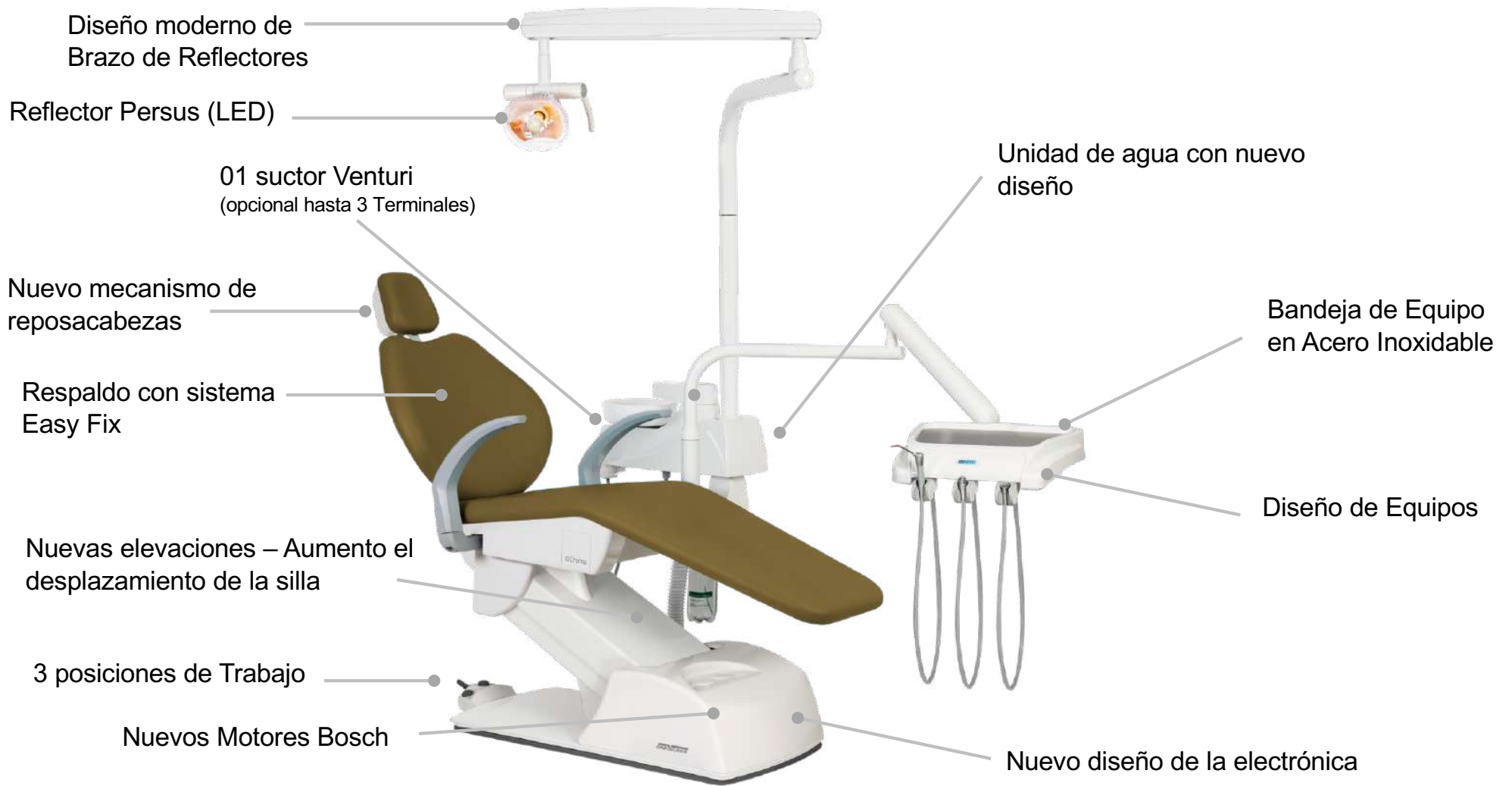

Diseño moderno de Brazo de Reflectores

Reflector Persus (LED)

01 suctor Venturi (opcional hasta 3 Terminales)

Nuevo mecanismo de reposacabezas

Respaldo con sistema Easy Fix

Nuevas elevaciones – Aumento el desplazamiento de la silla

3 posiciones de Trabajo

Nuevos Motores Bosch

Unidad de agua con nuevo diseño

Bandeja de Equipo en Acero Inoxidable

Diseño de Equipos

Nuevo diseño de la electrónica





 **Croma**

TAMBIEN DISPONIBLE
EN VERSION CARRO



Croma

SILLON

POSICIONES DE TRABAJO

Que es?

Programación de la silla que la coloca en una determinada posición de altura del asiento y respaldo según la configuración deseada por el profesional, es decir, su posición de trabajo.

Como funciona?

Coloque la silla en la posición deseada. Mantenga presionado uno de los botones relacionados con la posición de trabajo. Sonará un "pitido" que determina la grabación de la posición número 01, luego suelte el botón.

Si desea grabar la segunda posición del botón, después de que suene el primer "pitido" continúa con el botón presionado, sonará un segundo "pitido", que determina la grabación de la segunda posición.



PEDAL DE COMANDOS

 **Croma**

POSICION DE VUELTA A CERO

Que es?

Programación en la base de la silla que apaga el reflector y devuelve los movimientos de la silla, levantando el respaldo para colocar al paciente sentado y reduciendo su altura lo que facilita la salida del paciente.

Como funciona?

En cualquier posición en la que se encuentre la silla, opere el control de pie en el pedal, que está etiquetado como “Retorno a cero”



PEDAL DE COMANDOS


 Croma

Sistema Easy Fix

El sistema de fijación "Easy Fix" son sujetadores industriales con alta capacidad de retención de objetos que consta de dos partes, con pasadores de plástico en forma de pelota.

Cuando las dos piezas del broche se presionan una contra la otra, las cabezas de las pelotas se unen y forman la fijación.


Para soltar la fijación, simplemente separe ambas partes con las manos. Este bloqueo proporciona un accesorio rápido, seguro y reposicionable para una amplia variedad de aplicaciones.

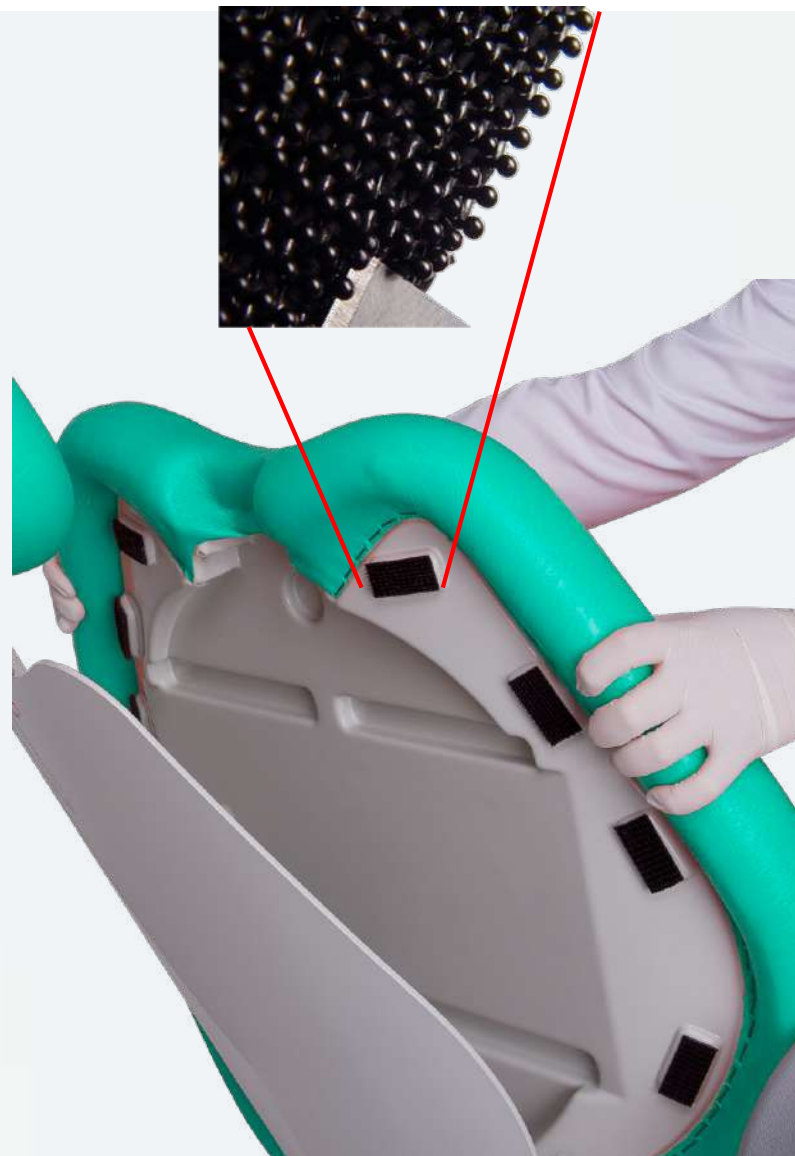



UNIDAD DE AGUA

UNIDAD DE AGUA

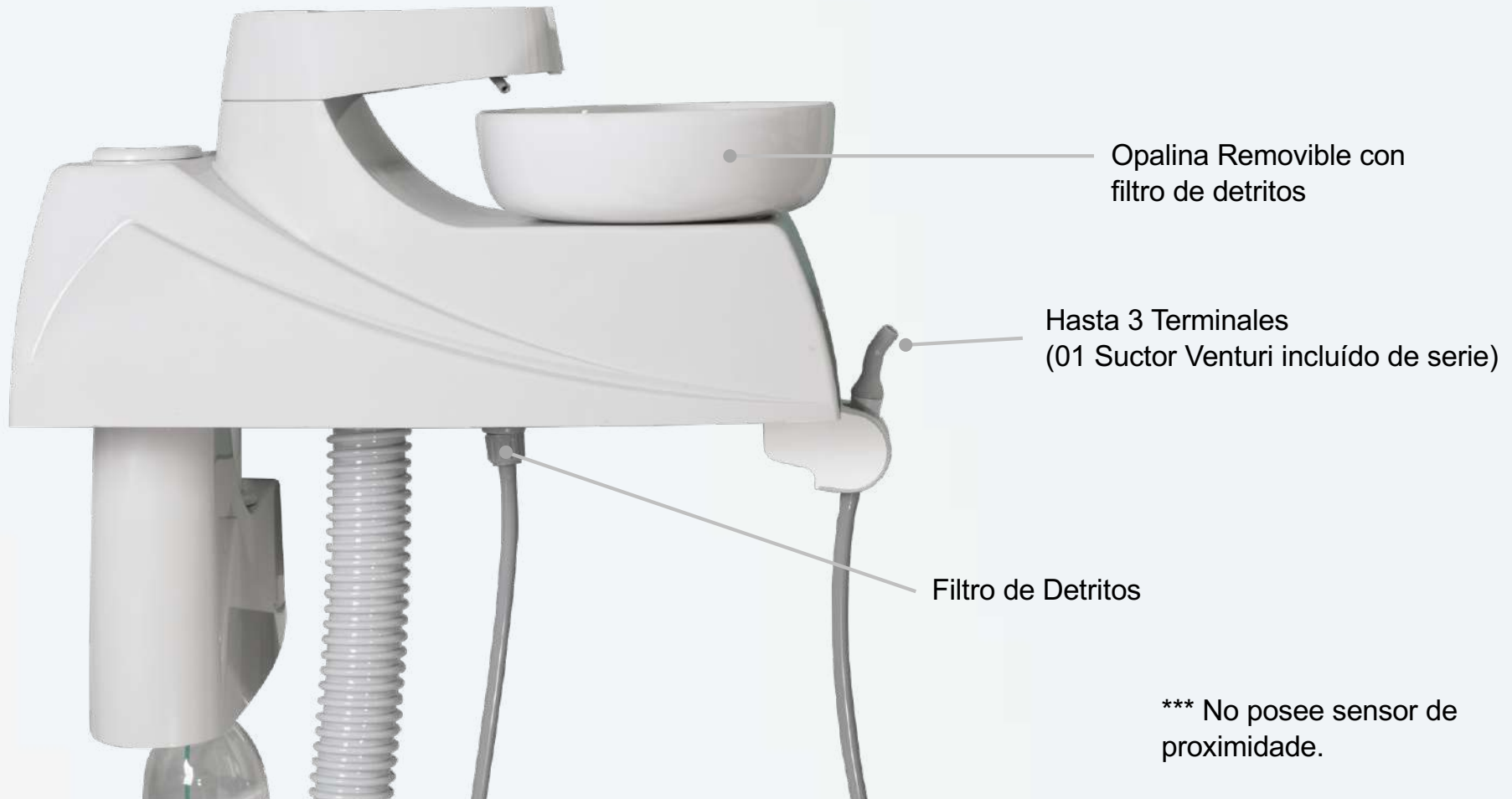

The logo icon consists of three overlapping, rounded rectangular shapes that create a sense of depth and perspective, resembling a stylized 'C' or a cluster of pages.

Croma

REFLECTOR



REFLECTOR PERSUS LED


- Espejo multifacético con tratamiento multicapa.
- Doble protección de espejo, en material duradero y transparente.
- Manillas bilaterales ,
- Cabezal con giro de 620º
- Intensidad de: 8.000 a 35.000 LUX



REFLECTOR PERSUS

Ajuste de Intensidad

Para ajustar la intensidad de la iluminación simplemente presione y mantenga presionado el botón accionador del reflector; La intensidad de la iluminación variará de menor a mayor intensidad.

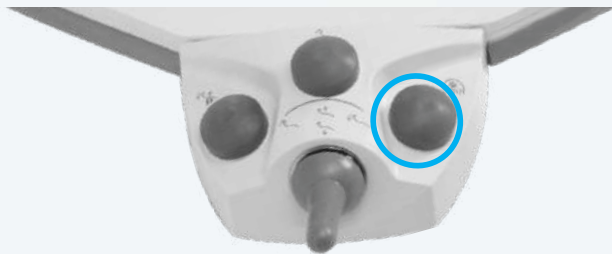


Cuando se alcanza la intensidad deseada, suelte el pedal. La intensidad de la iluminación será memorizada.



Croma

BRACKET

KIT PAD – EQUIPO (Opcional)

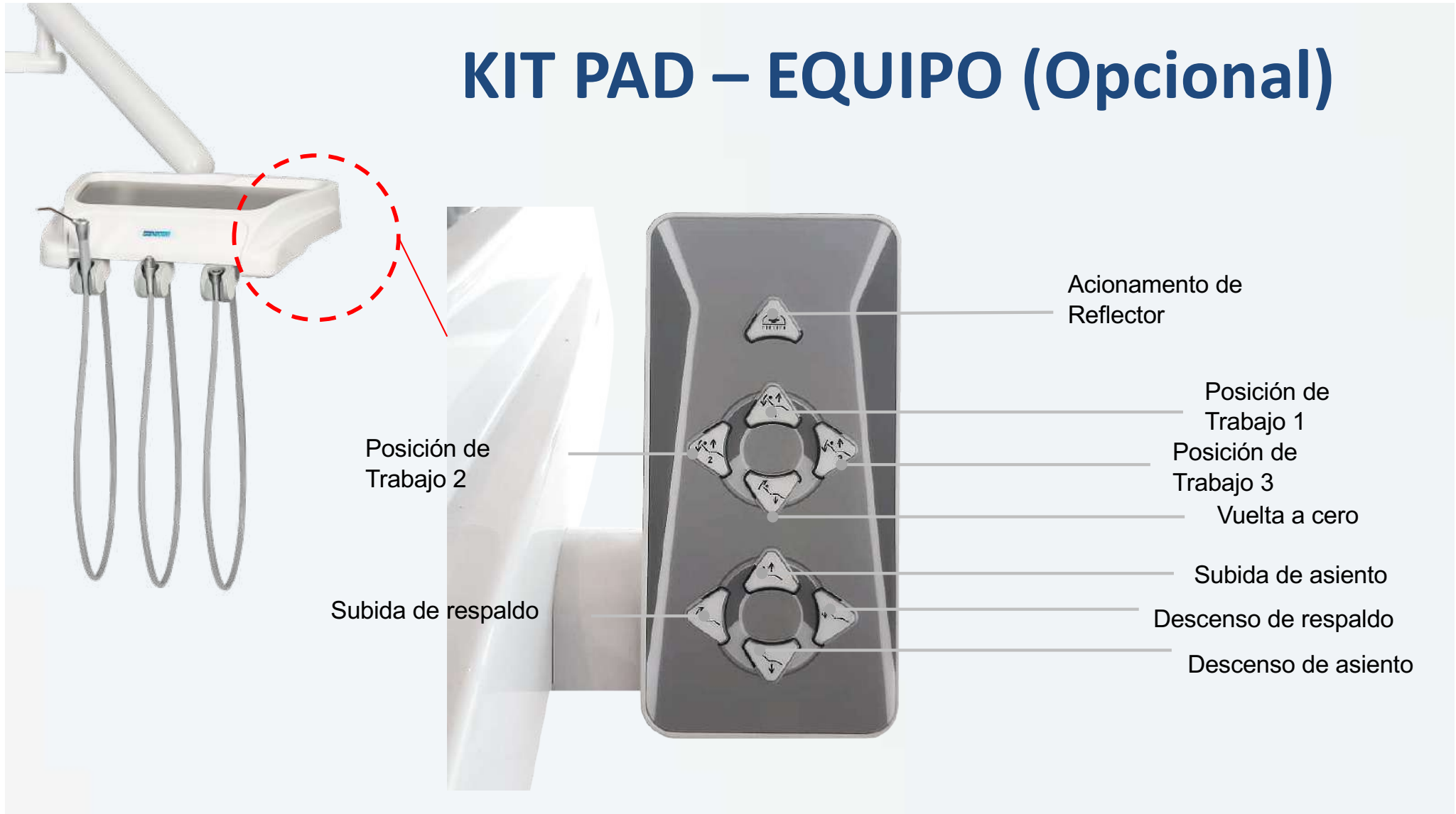

JERINGA TRIPLE



Punta Removible y
Autoclavable

Pulsadores de agua / aire y chorro,
colocados lateralmente para una
mejor ergonomía.

KIT'S OPCIONALES

Kit Suctor Bomba Vacio


Unidad de agua
DAB2789



Nuevo desarrollo. Más eficiente y garantiza una calidad de succión superior muy cercana al rendimiento de una bomba de vacío (Consumo de aire 80 lts/min)

Kit Suctor Vac Plus

Unidad de agua
DAB1906

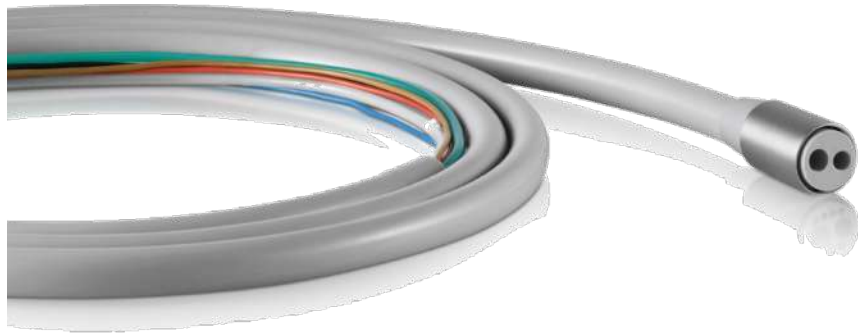

Kit Terminal adicional

B2 o M:4
DAB7109 o DAB7110



Kit Jeringa Triple

Para salivero
DAB7112



Kit Pad

Bracket
DAB1112

Kit Sensor Proximidad

Salivero
DAB1110



Kit Negatoscópio

Bracket
DAB1111



DABI ATLANTE

surdent